



GUÍA PARA USUARIOS DE AUDÍFONOS

WIDEX REMOTE CARE™



YA ES POSIBLE REALIZAR **UNA SESIÓN CON SU AUDIOPROTESISTA A DISTANCIA,** ESTÉ DONDE ESTÉ.

WIDEX REMOTE CARE™ le permite ajustar su audición en tiempo real, conectándole simplemente con su audioprotesista mediante su smartphone.

De esa manera, usted puede realizar una consulta a distancia y ahorrarse una visita al centro auditivo. Puede explicar a su audioprotesista sus dificultades auditivas en ese mismo momento cómodamente desde casa, o donde usted prefiera. Y no tiene que acordarse de cada situación que le genera dificultades auditivas cuando vaya a la próxima cita.

Gracias a WIDEX REMOTE CARE™, puede conseguir ayuda en el mismo momento, para así sentirse cada vez más cómodo y seguro con su audición y su audífono.

CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO SU CITA A DISTANCIA

Mantener una conversación usando la aplicación REMOTE CARE es muy diferente a una conversación en el centro auditivo. Antes de empezar, le damos unos consejos para que su cita a distancia sea todo un éxito

- Compruebe que los audífonos, el smartphone y el REMOTE LINK están completamente cargados
- Encuentre un lugar tranquilo para mantener la conversación
- Mueva el smartphone lo mínimo posible durante la conversación. Puede usar, por ejemplo, un soporte para smartphones
- Coloque la cámara enfocada hacia su cara, para que el audioprotesista pueda verlo
- No se distraiga durante la sesión; no responda otras llamadas ni intente hacer varias cosas a la vez

Recuerde que es posible que el audioprotesista tome notas durante la conversación por lo que, sino lo está mirando a usted, probablemente sea por eso.



CÓMO EMPAREJAR EL REMOTE LINK CON SU DISPOSITIVO MÓVIL

El audioprotesista configurará el REMOTE LINK, pero también hay que emparejarlo con su dispositivo móvil.

Primeros pasos con Android

- Descargue la aplicación WIDEX REMOTE CARE en Google Play
- Siga la guía para realizar el emparejamiento en la aplicación* (figuras 1-7)
- Cuando se complete el proceso, llegará a la página de bienvenida (figura 8) y podrá sumarse a la sesión a la hora a la que tenga su cita

*Según el dispositivo Android que esté usando, es posible que aparezcan más cuadros de diálogo, por ejemplo, sobre la aceptación del uso de cámara y micrófono en la aplicación.

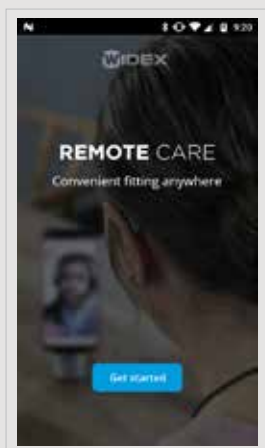


Figura 1



Figura 2

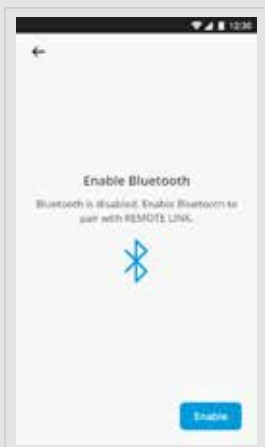


Figura 3

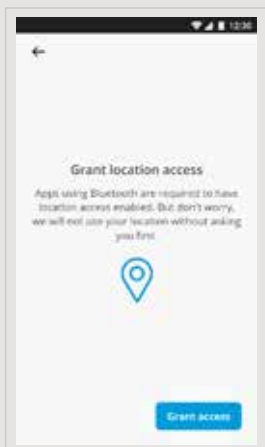


Figura 4



Figura 5

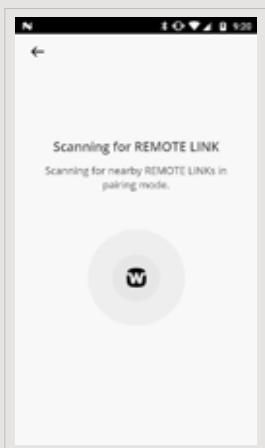


Figura 6

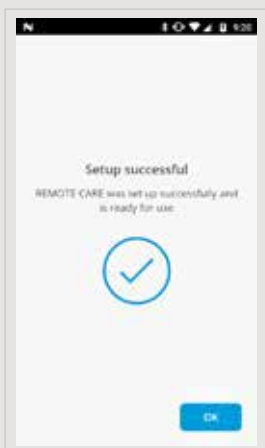


Figura 7

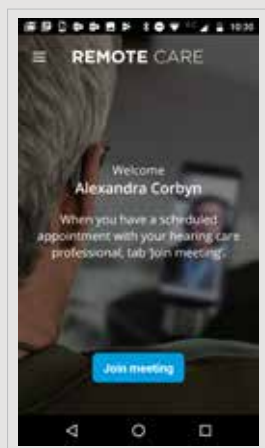


Figura 8

CÓMO EMPAREJAR EL REMOTE LINK CON SU DISPOSITIVO MÓVIL

El audioprotesista configurará el REMOTE LINK, pero también hay que emparejarlo con su dispositivo móvil.

Cómo empezar con iOS (Apple)

- Descargue la aplicación WIDEX REMOTE CARE en App Store
- Siga la guía para realizar el emparejamiento en la aplicación* (figuras 1-6)
- Cuando se complete el proceso, llegará a la página de bienvenida (figura 7) y podrá sumarse a la sesión a la hora que tenga la cita

*Es posible que aparezcan más cuadros de diálogo, por ejemplo, sobre el uso de cámara y micrófono en la aplicación

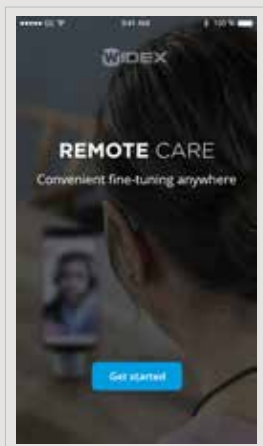


Figura 1



Figura 2



Figura 3

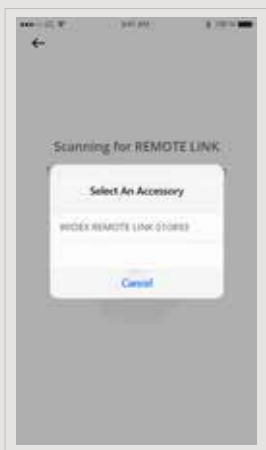


Figura 4

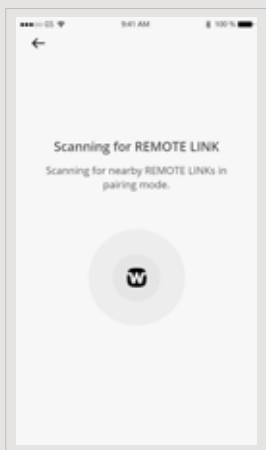


Figura 5

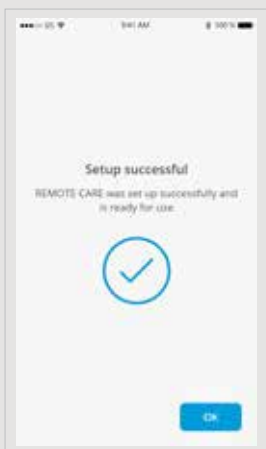


Figura 6

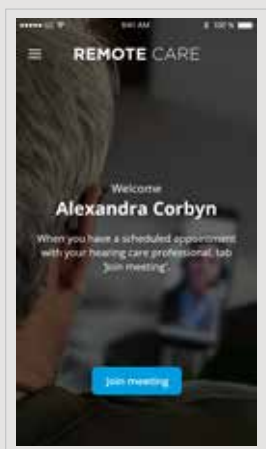


Figura 7





CÓMO **SUMARSE** A UNA CITA **A DISTANCIA**

- Abra la aplicación REMOTE CARE
- Presione el botón de encendido dos segundos para encender el REMOTE LINK. En cuanto se inicie la sesión, el audioprotesista podrá conectarse a sus audífonos
- Seleccione «Sumarse a la sesión» en la aplicación y espere a que también se una el audioprotesista

Ya está listo para tener la cita a distancia.

Cuando la sesión a distancia esté a punto de acabar, deje que el audioprotesista termine la llamada para garantizar que se guarden todos los cambios hechos en el audífono.

Cuando la sesión haya terminado, puede cerrar la aplicación. ¡Ahora solo tiene que disfrutar de su audición mejorada!



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C068122



5 706069 872255

Impreso por ROS/2019-07. 9 502 5133 004 #01

Widex y WIDEX REMOTE CARE son marcas registradas de Widex A/S.



Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

